2. График выполнения процедуры для омоложения кожи

Мы рекомендуем проводить процедуру для омоложения кожи каждые 3 дня.

После использования

1. Уход за кожей

После выполнения процедуры Вы можете наносить на обработанные участки кожи лосьон, крем, дезодорант, увлажняющее средство или косметику. Если Вы ощущаете роздражение кожи или боль, не носите на кожу ничего до тех пор, пока эти симптомы не исчезнут. Если после нанесения какого-либо средства Вы ощущаете зуд, смойте его.

2. Нормальная реакция кожи на процедуру

После выполнения процедуры кожа может покраснеть, Вы можете ощущать зуд, пощипывание или тепло. Такие симптомы абсолютно безвредны и быстро исчезают. Симптомы сухости кожи и зуда могут возникнуть в результате бритья или в результате сочетания процедур бритья и обработки кожи световыми импульсами. Чтобы охладить обработаную область, можно приложить пакет со льдом или влажную салфетку для лица. Если ощущение сухости не исчезает, можете нанести на обработанный участок кожи увлажняющее средство без аромата.

3. Побочные эффекты

- Ожоги, сильные покраснения (например, вокруг волосяных фолликулов);
- Изменение цвета кожи (такое происходит очень редко);
- Накожное воспаление.

Очистка и хранение

- 1. После завершения процедуры выключите прибор, извлеките вилку из розетки и дождитесь, когда фотоэпилятор остынет.
- 2. Слегка смочите мягкую ткань в воде и протрите световое окошко и рефлекторы по бокам.
- 3. Храните прибор сухом и чистом месте при температуре -25-+75°C и влажности воздуха 75%.

Описание прибора







Как работает технология интенсивного импульсного излучения?

• В основе работы фотоэпилятора лежит технология интенсивного светового импульса (IPL). На волосяный фолликул направляется световой импульс, длина которого варьируется от 550 до 1200 нм.



Чем темнее волосы, тем лучше они поглащают световые импульсы.



Световые импульсы стимулируют переход волосяных фолликул в фазу покоя.



Высокоинтенсивные световые импульсы воздействуют на поверхность кожи и стимулируют регенерацию коллагеновых и эластиновых волокон.



Фототермический эффект улучшает функции кровеносных сосудов. Таким образом, происходит омоложение кожи и разглаживание морщин.

5) Для максимального эффекта прикладите прибор к поверхности кожи под углом 90°.






Во время генерации световых импульсов между кожей и прибором не должно быть зазоров.

- ⑤ Чтобы обеспечить надлежащий контакт с поверхностью кожи, хорошо прижмите прибор к коже. Нажмите кнопку , чтобы сгенирировать световый импульс. Во время генерирования световых импульсов Вы будете ощущать тепло.
- Прижмите прибор к следующей зоне, которою хотите обработать. Интервал между генерацией световых импульсов составляет 1-3 секунды.
- 8. После завершения процедуры выключите прибор. Для этого нажмите и удерживайте кнопку
 в течение 2 секунд. Затем извликите вилку из розетки.

3. Рекомендуемый график проведения процедур

1. График выполнения процедуры по удалению волос

- Начальная фаза
 Мы рекомендуем, чтобы интервал между первыми 4-5 процедурами составлял 2 недели.
- Поддерживающая фаза После завершения начальной фазы (4-5 процедур) мы рекомендуем обрабатывать кожу каждые 4 недели, когда видите, что волосы возобновляют рост. Это позволит сохранить достигнутые результаты и наслаждаться гладкой кожей в течение месяцев.

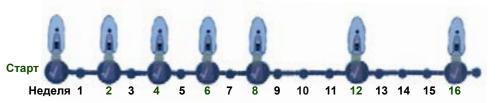

Установите на приборе требуемый уровень интенсивности. Чтобы опредилить, какой уровень интенсивности подойдет именно Вам, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией, предоставленной в таблице внизу.

| Цвет кожи | | Уровень интенсивности |
|-----------|---|-----------------------|
| I. | Очень светлая: подвержена солнечным ожогам, не загорает. | 6-8 |
| II. | Светлая: легкие солнечные ожоги, минимальный загар. | 5-7 |
| III. | Светло-корчневая: легкие солнечные ожоги, светло-коричневый загар, появляется медленно. | 4-6 |
| IV. | Смуглая: солнечные ожоги бывают редко, загар появляется быстро. | 2-4 |
| V. | Очень смуглая: солнечные ожоги бывают редко, загар появляется очень быстро. | Не используйте прибор |
| VI. | Темная: солнечные ожоги бывают очень редко, очень темный оттенок загара. | Не используйте прибор |

- б.) Процедура обработки должна быть безболезненной. Если во время процедуры Вы ощущаете дискомфорт, уменьшите уровень интенсивности.
- берите подходящий для Вашего оттенка кожи уровень интенсивности.


7

2. Обращение с прибором

1. Перед использованием очистьте световое окошко.



(3.) Вставьте вилку в розетку.

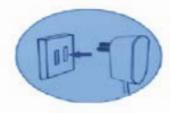

Вставьте разъем блока питания в гнездо прибора.



(4) Включите прибор и выберите подходящий для Вашего оттенка кожи уровень интенсивности.




Противопоказания

1. Общие противопоказания

Пикогда не используйте прибор, если у Вас темная кожа. Перед началом эксплуатации фотоэпилятора определите свой оттенок кожи. Для этого ознакомьтесь с информацией, предоставленной в таблице внизу.



Использование прибора будет неэффективным, если у Вас серый, рыжий или седой оттенок волос. Перед началом эксплуатации фотоэпилятора убедитесь, что Ваш оттенок волос соответствует оттенкам, указанным в таблице ниже.

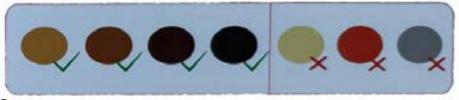

- ③ Не используйте прибор, если Вы беременны или кормите грудью.
- Не используйте прибор, если в Вашем теле установлены импланты.

2. Медицинские противопоказания

1. Не используйте прибор, если:

- Ваша кожа обрабатывается или была обработана некоторое время назад (например, на прошлой неделе) альфагидрокислотой, бетагидрокислотой, изотретиноином или азелаиновой кислотой:
- 2. Вы в течение последних 6 месяцев принимали Аккутан или Роаккутан. Прием этих препаратов повышает чувствительность кожи, может вызывать слезотечение и уменьшать скорость заживления ран;
- 3 Вы принимаете фотосенсибилизирующие агенты или медикаменты. Если в инструкции к этому средству указано, что оно может вызывать фотоаллергические реакции, фототоксические реакции или Вы не должны находиться на солнце, не используйте этот прибор;

④ Вы принимаете антикоагулянтные препараты, включая аспирин, и не имеете возможности прервать прием хотя бы за 1 неделю до выполнения процедуры, выделяя, таким образом, время для выведения препарата из организма.

2. Не используйте прибор, если:

- в течение последних 3-х месяцев Вы проходили лучевую терапию или химиотерапию;
- Вы принимаете обезболивающие препараты, которые снижают чувствителность кожи к теплу:
- (3.) Вы принимаете иммунодепрессанты;
- в течение последних 3-х недель Вам делали операцию в зоне, которою Вы хотите обработать фотоэпилятором.

3. Противопоказания, связанные с заболеваниями

1. Не используйте прибор, если у Вас диагностировали:

- 1) диабет или другие системные или метаболические заболевания;
- 2) застойное заболевание сердца;
- застойное заболевание, связанное с фоточувствительностью;
- (4) неправильный коллагеновый обмен;
- 5.) повышенную чувствительность к свету или склонность к сыпям и аллергиям;
- б. заболевание кожи, например, рак кожи в стадии обострения или Вы раньше болели раком кожи или другим видом рака, уражающим зону, которою хотите обработать;
- П нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы;
- нарушение свертываемости крови;
- 9) иммуносупрессивное заболевание.

4. Противопоказания, связанные с участками кожи


1. Не используйте прибор на участках локализации:

- очагов инфекции, экземы, ожогов, воспаления волосяных фолликулов, открытых резаных ран, ссадин, герпеса, повреждений или гематом;
- солнечных ожогов, покраснений, порезов или загара;
- родинок, веснушек, увеличенных вен, затемненных пигментированных пятен, рубцов или кожных аномалий. Использование прибора на таких участках может привести к ожогам и изменению цвета кожи, что затрудняет диагностирование заболеваний, связанных с кожными заболеваниями. Если Вы все же хотите использовать прибор, проконсультируйтесь у врача;
- 4. бородавок, татуировок или перманентного макияжа.

2-х секунд, чтобы включить прибор.

1. Нажмите и удерживайте кнопку 📵 в течение



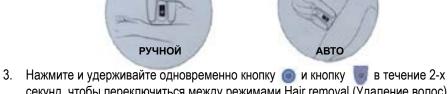

нажмите и удерживаите одновременно кнопку и кнопку в течение 2-х секунд, чтобы переключиться между режимами Hair removal (Удаление волос) и Skin rejuvenation (Омоложение кожи).



Примечание: Процедура омоложения кожи выполняется только на первом уровне интенсивности.

- Подготовьте предварительно участки кожи, на которых планируете выполнять процедуру;
- Очистите поверхность кожи и убедитесь, что на ней отсуствуют волосы и остатки маслянистых веществ. Кроме того, кожа должна быть сухой.

2. Проверка оттенка кожи

• Просмотрите таблицу оттенков кожи, чтобы убедиться, что Вашу кожу можно обрабатывать фотоэпилятором.



2. Проверка цвета волос


 Просмотрите таблицу цветов волос, чтобы убедиться, что волосы на Вашей коже можно обрабатывать фотоэпилятором.



Во время эксплуатации

1. Выбор уровня интенсивности

Во время эксплуатации прибора можна выбрать 1 из 8 уровней интенсивности. Уровень интенсивности необходимо выбирать в зависимости от оттенка Вашей кожи. Кроме того, всегда обращайте внимание на ощущение комфорта во время выполнения процедуры.

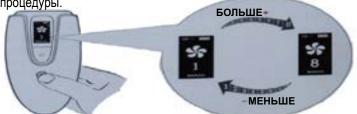

Для выбора уровня интенсивности нажмите кнопку . После каждого нажатия этой кнопки уровень интенсивности будет увеличиваться на 1 уровень. Когда будет установлено 8 уровень интенсивности, после нажатие кнопки уровень интенсивности будет уменьшаться на 1 уровень до тех пор, пока не будет выбран 1 уровень.

5. Противопоказания, связанные с участками кожи

1. Не направляйте световые импульсы:

- (1.) на участки вокруг глаз и возле бровей;
- на губы, соски, околососковые кружки, малые половые губы, влагалище, анальное отверстие, ноздри и уши;
- на зоны нанесения стойких дезодорантов;
- 4 на участки или около них, где установлен исскуственный имплант, например, грудной имплант, кардиостимулятор, инъекционная игла и т. д.;

Мужчинам запрещено направлять световые импульсы на лицо и шею, включая бороду, а также на зону гениталий.



Если Вы не уверены можно ли Вам использовать этот прибор, проконсультируйтесь у врача.

Важные примечания

1. Предупреждения

- 1.) Храните прибор и блок питания в сухом месте;
- ② Чтобы избежать поражения электрическим током, в случае поломки прибора не касайтесь его внутринних деталей;
- З Не используйте фотоэпилятор в воде, поскольку контакт воды с электричеством является опасным:
- Физические, сенсорные или психические отклонения, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования фотоэпилятора лицом, отвечающим за их безопасность;
- Не разрешайте детям играться фотоэпилятором;
- Детям до 15 лет запрещено использовать этот прибор;
- Перед каждой процедурой убеждайтесь, что фотоэпилятор работает. Не используйте прибор, если он или блок питания сломан;
- Не используйте фотоэпилятор, если стекло светового окошка повреждено;
- Э Не пытайтесь модифицировать какую-либо деталь прибора, включая блок питани, и не укорачивайте кабель питания. Эксплуатировать фотоэпилятор после таких действий опасно;

- Будьте осторожны, когда приступаете к обработке кожи темного оттенка сразу после обработки кожи светлого оттенка;
- 10. После использования прибора стекло светового окошка может быть очень горячим. Не прикасайтесь внутренней части светового окошка пока оно не остынет.

2. Уход за прибором

- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не забиты.
- Не трясите и не ударяйте прибор;
- Э Если Вы переместили прибор из холодной среди в очень теплую среду или наоборот, необходимо выдержать прибор в условиях новой среды не менее 3 часов перед включением;
- 4) Храните прибор в чистом и сухом месте;
- (5) Не эксплуатируйте прибор при температуре ниже 15°С или выше 35°С;
- 6 Не подвиргайте прибор длительному воздействию солнечного или ультрафиолетового излучения. Это может стать причиной серйозного повреждения фотоэпилятора.

3. Меры предосторожности

- ① Этот прибор нельзя мыть, погружать в воду или ополаскивать под проточной водой;
- ②. С гигиенических соображений этим прибором должен пользоваться только один человек:
- ③ Эксплуатируйте фотоэпилятор, используя настройки, которые соответствуют Вашему оттенку кожи и цвету волос. Применение других настроек повышает вероятность проявления побочных эффектов и усиливает раздражение кожи:
- Свет световых импульсов безвредный для Вашего зрения. При эксплуатации прибора не смотрите на вспышки. Нет необходимости одевать на время проведения процедуры защитные очки. Используйте прибор в помещении с хорошим освещением, тогда свет от вспышек будет казаться еще менее ярким для Ваших глаз;
- б Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. После завершения процедуры всегда выключайте фотоэпилятор;
- 6) Загар может менять оттенок Вашей кожи и влиять на ее чувствительность;
- Перед процедурой очистите поверхность кожи и убедитесь, что на ней отсуствуют волосы и остатки маслянистых веществ. Кроме того, кожа должна быть сухой:
- (8) В течение 1 процедуры не обрабатывайте один участок кожи по несколько раз;
- Успользование прибора не должно быть болезненным. Если Вы ощущаете дискомфорт, уменьшите уровень интенсивности.

Курс процедур

1. После 1-ой процедуры (Первая неделя)


• После первой процедуры процесс выпадания волос может длиться 1-2 недели В первые недели Вы еще будете замечать, как растут волосы. Но, скорее всего, расти будут те волосы, которые на момент проведения процедуры не находились в фазе роста.

2. После 2-ой и 3-ей процедур (Вторая-четвертая недели)

• После проведения 2-3 процедур Вы должны заметить замедление роста волос. Однако для эффективной обработки всех волос важно продолжать соблюдать график выполнения процедур.

3. После 4-ой и 5-ой процедур (Шестая-восьмая недели)

 После проведения 4-5 процедур Вы заметите значительное замедление роста волос, а также их густоты. Чтобы сохранить этот результат, рекомендуем проводить каждые 4 недели профилактическую обработку кожи.

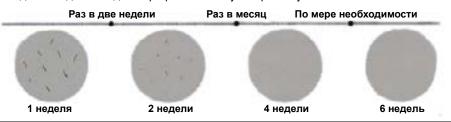

Перед использованием

1. Подготовка кожи

• Перед началом эксплуатации прибора сбрейте с поверхности кожи все волосы. Благодаря этому волосяные фолликули лучше будут поглощать световые импульсы, что увеличит эффективность использования фотоэпилятора. Волосы можно сбривать, подстригать, а также удалять с помощью эпиляции или воска. Не используйте крем-депиляторий, поскольку химические вещества, входящие в его состав могут вызывать раздражение кожи.



Если Вы удаляли волосы с помощью воска, не используйте фотоэпилятор в течение 24 часов после. этой процедуры. Ваша кожа должна отдыхнуть. Мы также советуем перед процедурой принять душ, чтобы удалить возможные остатки воска из кожи.