


Fairywill

   @FairywillCare

 www.fairywill.com

 support@fairywill.com

Дякуємо, що обрали іригатор для порожнини рота Fairywill. Перед початком експлуатації виробу, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

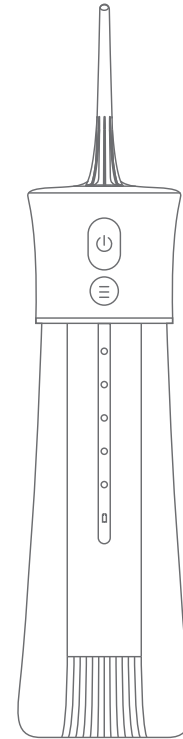

F30

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Вся інформація в цьому розділі надана для того, щоб навчити вас правильній та безпечній експлуатації цього пристрою, щоб ви могли уникнути травмування себе та інших, а також пошкодження майна.



ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
- Цей прилад містить батареї, які не підлягають заміні. Коли термін служби батареї закінчується, прилад слід утилізувати належним чином.
- Не надавайте прилад або батарею впливу надмірних температур.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем приладу, що працює від акумулятора, або акумулятора металевими предметами.
- Прилад повинен живитися тільки від безпечної наднизької напруги, що відповідає маркуванню на приладі.
- Необхідно використовувати блок живлення з вихідною потужністю, що не перевищує 15 Вт в нормальних і ненормальних умовах роботи.
- Малюки, немовлята, люди, які не в змозі керувати приладом, не повинні користуватися ним самостійно. Будь ласка, також зберігайте його якомога далі від дітей і в недоступному для них місці.
- Ніколи не намагайтеся змінювати, розбирати або ремонтувати пристрій.
- Не заливайте в бак воду, температура якої перевищує 40 °C.
- Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур цього приладу пошкоджений, його повинен замінити виробник, сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
- Тримайте шнур якомога далі від нагрітих поверхонь.
- Будь ласка, не використовуйте прилад, якщо ви загубили насадку.
- Не використовуйте для будь-яких інших цілей, крім чищення порожнини рота.
- Тримайте насадку якомога далі від маленьких дітей. Насадка досить мала, щоб її можна було проковтнути, і вона може застрягти в горлі.
- Певні види ополіскувачів для порожнини рота можуть пошкодити обладнання, розбивши корпус або резервуар для води. Тому не використовуйте ополіскувач для порожнини рота у резервуарі для води.
- Люди, які відчувають біль у зубах або яснах, не можуть користуватися цим пристроєм і повинні проконсультуватися зі своїм стоматологом перед використанням.
- Не притискайте насадку занадто сильно до зубів або ясен, це може пошкодити ясна.

19. Будь ласка, використовуйте адаптер, щоб напруга під час заряджання становила 5В---1000mA, інакше акумулятор може бути пошкоджений перезарядженням.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

1. Дизайн:

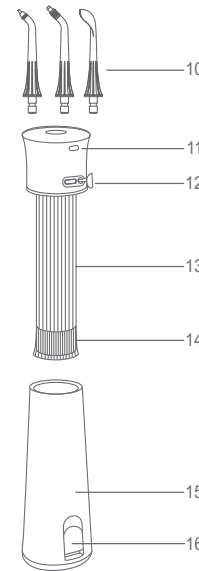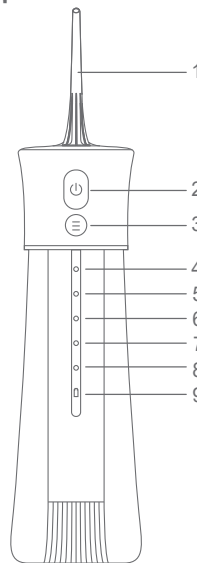

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ① Стандартна (струменева) насадка | ② Кнопка Увімкнення/Вимкнення |
| ③ Кнопка Режиму | ④ М'який |
| ⑤ Звичайний | ⑥ Потужний |
| ⑦ Імпульсний | ⑧ Точковий |
| ⑨ Індикатор живлення | ⑩ Ортодонтальна/Періодонтальна/Насадка для чищення язика |
| ⑪ Кнопка розблокування | ⑫ Порт для зарядки (основа зарядного пристрою) |
| ⑬ Панель управління | ⑭ Фільтрувальна частина |
| ⑮ Резервуар для води | ⑯ Кришка Резервуара Для Води |

Примітка:

Перед використанням всередині основного пристрою може залишитися трохи рідини (бак, всмоктувальна трубка тощо), це залишки дистильованої води, яку було використано для тестування продуктивності (витрати води), тому немає жодних проблем зі здоров'ям.



2. Застосування:

2.1 Зарядження пристрою (Як показано на мал. 1)


- Будь ласка, щільно закрийте кришку резервуара перед використанням іригатора для порожнини рота, щоб уникнути витоку води.
- Зніміть захисну кришку з роз'єму для зарядки, вставте кабель (переконайтеся, що всередині пристрою не залишилося рідини).
- Надійно вставте адаптер для зарядження в розетку.
- Індикатор "Power" блимає, коли пристрій заряджається. Коли він повністю зарядиться, білий індикатор "Power" горітиме протягом 2 хвилини, після чого він автоматично вимкнеться.
- Після завершення зарядження знову надіньте кришку на порт для зарядження.



Примітка:

Індикатор "Power" блиматиме червоним, коли потужність нижча за 10%; коли потужність нижча за 3%, червоний індикатор "Power" блиматиме 5 разів, а потім він автоматично вимкнеться, пристрій також буде вимкнено і не зможе працювати. Повне зарядження пристрою займає 4 години.

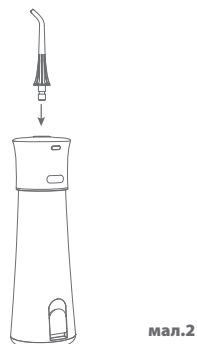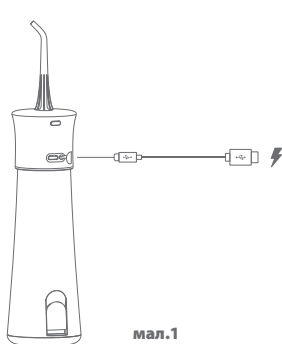

2.2 Використання іригатора

- Вставте насадку в пристрій (мал. 2)
- Відкрийте кришку резервуара для води, щоб наповнити, температура води не повинна перевищувати 40°C, потім закрийте кришку. (мал. 3)
- Або від'єднайте резервуар для води від основного блоку, наповніть водою, температура якої не повинна перевищувати 40°C, потім прикріпіть резервуар до пристрою. (мал. 4)
- Натисніть кнопку  , щоб змінити режим роботи після увімкнення панелі керування, режим за замовчуванням залишається таким самим, як і під час останнього вимкнення. (мал. 5)

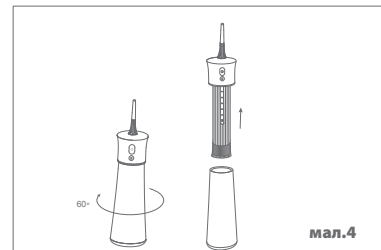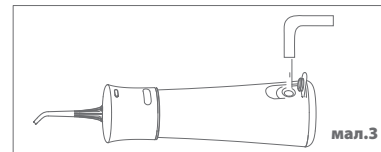

Режими роботи іригатора:


Soft (м'який): для дбайливого очищення чутливих ясен тиск води становить 4-6 кгс/см2.



Normal (звичайний): тиск води становитиме 6-8 кгс/см2.

Potent (потужний): для людей, які висувають високі вимоги до чищення зубів і ясен тиск води становить 8-11 кгс/см2.


Pulse (імпульсний): для масажу ясен тиск води становитиме близько 4-6 кгс/см2.

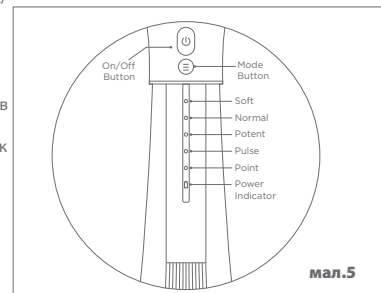
Point (точковий): для очищення певної ділянки зубів або ясен тиск води становитиме 8-11 кгс/см2., вода виходитиме щільним струменем із невеликими інтервалами.




- Тримайте пристрій у вертикальному положенні так, щоб наконечник насадки був спрямований до ваших зубів
- Тримайте рот злегка відкритим, щоб вода могла витікати.
- Натисніть кнопку  , незабаром після увімкнення пристрою він запуститься в попередньому режимі, ви також можете вимкнути його, натиснувши кнопку  (мал. 6) .

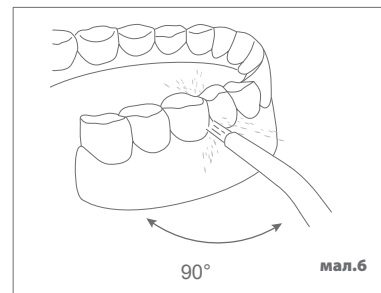

- 1) Направте струмінь води під кутом 90 градусів до зубів і ясен.
- 2) Повільно направляйте струмінь води вздовж зубів.

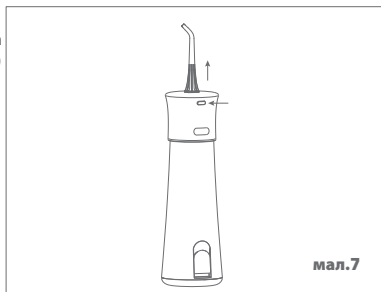


- 3) Направте струмінь води вздовж лінії ясен за допомогою наконечника насадки під кутом 90 градусів до ясен.
- 4) Ретельно очистіть проміжки між зубами і навколо брекетів, коронок або мостовидних протезів за їх наявності.
- 5) Міцно тримайте основу приладу, потім витягніть насадку. (мал. 7)
- 6) Після завершення чищення порожнини рота натисніть кнопку  щоб вимкнути пристрій.



2.3 Після використання приладу (мал.8)

- Відкрийте кришку резервуара для води та злийте воду.
- Натисніть кнопку  щоб увімкнути прилад, і злийте воду з пристроєм.
- Затисніть кнопку  знову, щоб вимкнути прилад, і закрийте резервуар для води.
- Протріть пристрій сухою тканиною.

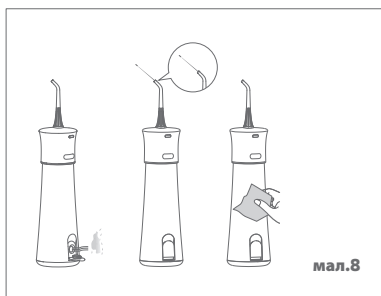

3. Технічні характеристики:

Робоча температура: 0-50 °C

Робоча напруга: постійний струм 3,7В

Вхідна напруга: постійний струм 5,0В Розрахункова

потужність: 6,0-7,0 Вт

Ступінь водонепроникності: IPX7

4. Гарантії:

- Гарантія 1 рік з моменту купівлі.
- Протягом гарантійного терміну за будь-якого дефекту, який може виникнути через матеріали або процес виготовлення виробу, ми замінимо деталі або весь продукт залежно від обставин.
- Під час подачі заявки на безкоштовний ремонт ви маєте надати продукт і документ, який може підтвердити представникам бренду Fairywill дату покупки (гарантійний талон, чек).
- Гарантія не поширюється на такі умови:
 - Повредження, вызваннные ненадлежащим использованием, например, неправильным использованием джерела живлення, підключенням до невідповідної розетки, штучним пошкодженням тощо.

- Старіння і природний знос унаслідок використання
- Проблеми, що виникли через використання приладу для інших цілей або неправильного використання, або використання компонентів, що не поставляються Fairywill.

5. Контакти:



Вироблено в Китаї.

Переробка та екологічно чиста утилізація

У пристрій вбудовано літєву батарею, що перезаряджається. Під час утилізації приладу не змішуйте його зі звичайними побутовими відходами. Його слід відправити в центр утилізації акумуляторів для утилізації відповідно до місцевих правил утилізації.



Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати як побутові відходи. Замість цього його слід здати до відповідного пункту збору для утилізації електричного та електронного обладнання.

Переконавшись у правильності утилізації цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини, які в іншому разі могли б бути спричинені неправильним поводженням з відходами цього виробу. Для отримання детальнішої інформації про вторинну переробку цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевою радою або службою утилізації побутових відходів.